


КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ МОДЕЛЬ КМО.191.03

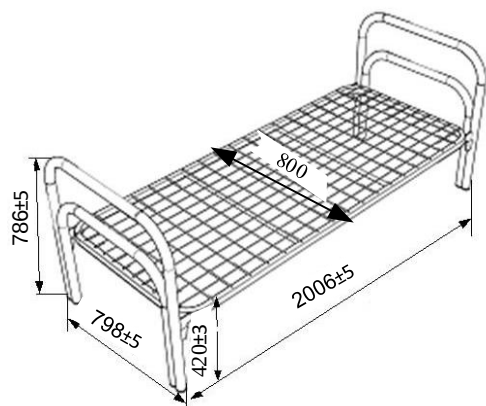

Вес изделия: 19,7 кг
 Вес брутто: 20,7 кг
 Габариты упаковки: 2000x820x135 мм
 Количество в упаковке: 1 шт.
 Количество мест: 1

Кровать металлическая предназначена для оборудования общественных, бытовых помещений, для размещения пациентов и ухода за ними в лечебных медицинских учреждениях – больницах, поликлиниках, медицинских центрах, родильных домах, и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебелиной продукции»**

Габариты изделия,	(ДхШхВ) - 2006x800x786 мм Спальное место - 800x1900 мм
Состав изделия:	Кровать представляет собой разборную конструкцию, состоящую из каркаса и двух спинок.
Каркас	Каркас гнутый, выполнен из стальной электросварной, полуовальной трубы сечения 40x25x1,35 мм, методом гибки. Полотно каркаса – сварная сетка, изготовлена из проволоки Ø 3,8 мм, с размером ячейки 100x65 мм, расположенной в двух взаимно перпендикулярных направлениях соединённых в местах пересечения контактной точечной сваркой. Проволока изготовлена из низкоуглеродистой стали холоднотянутая. Сетка закреплена к каркасу при помощи сварки. Для увеличения жесткости, к каркасу приварены две переемычки, изготовленные из трубы круглого сечения Ø 20x1,5 мм. С боков, по торцам каркаса, приварено четыре крючка выполненных методом холодной штамповки из стали марки Ст3. толщиной 3,5 мм.
Спинки	Каждая спинка П-образной формы выполнена из двух стальных, электросварных труб круглого сечения Ø38x1,2 мм методом гибки, сваренных между собой. К каждой спинке приваривается по две петли, выполненные методом холодной штамповки из стали марки Ст.3, толщиной б=1,5 мм для крепления каркаса. Открытые концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Сборка	Спинки с каркасом собираются при помощи крючков и петель клиновым методом.
Общая информация	Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно спальное место – не более 120 кг. Материалы, применяемые для изготовления кроватей, имеют сертификаты. Поставка кроватей в торговую сеть производится в упаковке из картона и термоусадочного полиэтилена. Эксплуатировать кровать допускается с матрасом любого наполнения. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Простота конструкции дает возможность производить сборку изделия без применения специального инструмента. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия, при вне рыночном распределении – со дня получения её потребителем. Установленный срок службы – не менее 10 лет.
Сведения о дезинфекции и стерилизации	Наружные поверхности кровати устойчивы к многократной дезинфекции по МУ-287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644-96 или другим дезинфицирующим раствором. Стерилизация не требуется.