
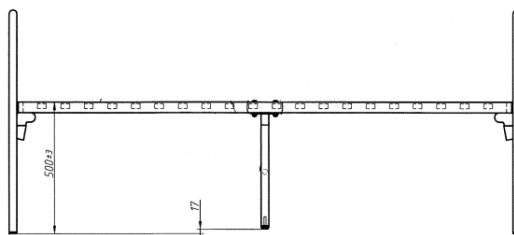


КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ МОДЕЛЬ КМО.104.13

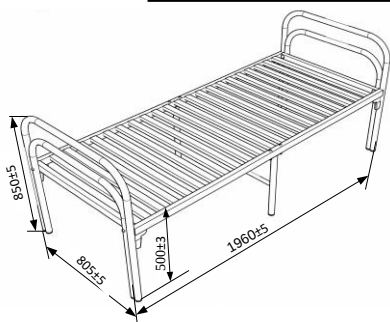

Вес изделия: 33,2 кг/ Вес брутто: 34,5 кг
Габариты упаковки: 2000х820х160 мм
Количество в упаковке: 1 шт., Количество мест: 1 шт

Кровать металлическая предназначена для оборудования общественных, бытовых помещений, для размещения пациентов и ухода за ними в лечебных медицинских учреждениях – больницах, поликлиниках, медицинских центрах, родильных домах, и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебелиной продукции»**

Габариты изделия,	(ДхШхВ) Спальное место	- 1960х805х850 мм - 800х1900 мм
Состав изделия:	Кровать представляет собой разборную конструкцию, состоящую из каркаса, двух спинок и дополнительной ноги.	
Каркас	Каркас кровати сварной, выполнен из стальной электросварной трубы сечением 40х25х1,5 мм. Наполнение каркаса – стальной профиль прямоугольного сечения 40х25х1,0 в количестве 20 шт. С боков, по торцам каркаса, приварено четыре крючка, выполненных методом холодной штамповки из стали марки Ст3.толщиной 3,5 мм. В торцах каркаса предусмотрено по два отверстия для дополнительного соединения каркаса к спинкам. По длинной стороне имеются отверстия для крепления дополнительной ноги.	
Спинки	Каждая спинка, П-образной формы, выполнена из двух стальных, электросварных труб круглого сечения Ø30х1,2 мм, сваренных между собой. На спинках предусмотрены по два отверстия для соединения с каркасом. К каждой спинке приваривается по две петли, выполненные методом холодной штамповки из стали марки Ст.3, толщиной б=1,5 мм для крепления каркаса. Открытые концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.	
Дополнительная нога	По центру каркаса имеется дополнительная нога, состоящая из двух стальных труб, расположенных вертикально, диаметром Ø30х1,2 мм и соединяющей горизонтальной трубы Ø20х1,2 мм при помощи сварки. Для соединения с каркасом, к торцам труб приварены две пластины, имеющие по два отверстия каждая. В стойки ножки установлены регулируемые заглушки. <i>Дополнительная ножка имеет меньшую высоту, чем высота спинки, что обусловлено конструктивной особенностью каркаса, для исключения деформации, превышающей норму согласно ГОСТ 19917-14, при эксплуатации кровати.</i>	
Сборка	Спинки с каркасом собираются при помощи крючков и петель клиновым методом с дополнительным креплением винтовыми соединениями. Дополнительная нога крепится к каркасу винтовыми соединениями.	
Общая информация	Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно спальное место – не более 120 кг. Материалы, применяемые для изготовления кроватей, имеют сертификаты. Поставка кроватей в торговую сеть производится в упаковке из картона и термоусадочного полиэтилена. Эксплуатировать кровать допускается с матрасом любого наполнения. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Простота конструкции дает возможность производить сборку изделия без применения специального инструмента. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия, при внеыночном распределении – со дня получения её потребителем. Установленный срок службы – не менее 10 лет.	
Сведения о дезинфекции и стерилизации	Наружные поверхности кровати устойчивы к многократной дезинфекции по МУ-287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644-96 или другим дезинфицирующим раствором. Стерилизация не требуется.	